

CAMA **XXL X'PRESS**

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LA DIRECTIVA EUROPEA 93/42/CEE. HA SIDO DISEÑADO Y FABRICADO DE CONFORMIDAD CON LA NORMA VIGENTE CEI 60601-2-52



Troubles musculo-squelettiques

La primera cama de gran anchura autoportante sin kit de transporte.



• Disponible en **120 y 140 cm.**



• **Montaje rápido** sin herramientas en pocos minutos.

• **Extremadamente maniobrable:** la cama plegada se desplaza sobre sus propias ruedas de 100 mm de diámetro. El paso de obstáculos está claramente optimizado.




Imágenes no contractuales

Ideal para el domicilio. La cama XXL X'PRESS se desplaza en posición vertical. Montaje sin herramientas




Rango de altura:
35 - 81 cm.

3 funciones eléctricas con plegado de rodillas.

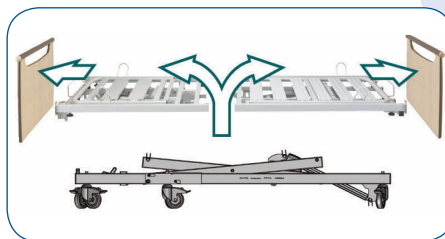

Quitar los paneles, el elevador de respaldo y luego el elevador de piernas.

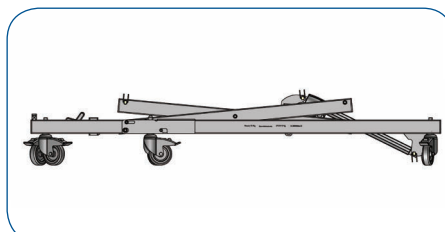

Levantar ligeramente la cruceta para montar la base.

EASY MOVE



Fijación de los paneles por sistema EASY MOVE: sencillo, rápido y seguro.

CAMA XXL X'PRESS: CONFIGURABLE Y EVOLUTIVA



Elevador de respaldo eléctrico (estándar)



Elevador de piernas con cremalleras.



Ruedas Ø100 mm

Freno independiente en cada rueda de la cama



Anchas láminas metálicas soldadas. Diseñadas para un fácil mantenimiento.



Extensión de somier de 20 cm. (Accesorio)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | ER* | ELEVADOR DE PIERNAS | CARGA NORMAL DE USO | RUEDAS | NORMAS | ESTANQUEIDAD |
|--|----------------------------------|-----------|--|--|--|----------------|--------------------------------------|
| XXL X'PRESS 3 funciones eléctricas con plegado de rodillas | 120 x 200 cm Somier divisible | hasta 75° | Pliegue de rodillas 26° y 16° Ajuste de los pies por cremallera | 315 kg Colchón 30 kg paciente 270 kg accesorios 15 kg | Ø100 mm con freno sin tapa guardahilos | CEI 60601-2-52 | Motor, caja y botonera LINAK IP66 V0 |
| 120cm Ref. IXX3L08120e | 140 x 200 cm Somier divisible | | | | | | |
| 140cm Ref. IXX3L08140e | | | | | | | |

* ER = Elevador de Respaldo

- 2 soportes para accesorios (en los largueros)
- 2 soportes de mástil porta gotero (en cabezal de la cama)
- 2 soportes de mástil incorporador (en cabezal de la cama)



Garantía mecánica, eléctrica y de la botonera 5 años.*

Garantía de los paneles y accesorios 1 año.*

*En condiciones normales de uso y excepto piezas de desgaste, ver instrucciones de uso.

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Con el propósito de mejora permanente de sus productos, el GRUPO WINNCARE se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas - fotografías no contractuales.