

# LAS BARANDILLAS DE PROTECCIÓN



PORQUE CADA PACIENTE MERECE UNA ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA, OFRECEMOS 3 ACCESORIOS DISTINTOS

## BARANDILLAS 3/4 MEAL - 3 BARANDILLA



Estas BARANDILLAS retráctiles son compatibles con todas nuestras camas\*. Equipado con sistemas de fijación para evitar una instalación incorrecta, cumplen los requisitos de separación de la norma 60 601-2-52.

Son compatibles con nuestras tapicerías y están disponibles en 4 colores en función del color del somier.



Sistema de fijación por indexación



\* Excepto Kalin

▶ Deben proporcionarse barandillas de cama si así se especifica en la prescripción.

## BARANDILLA DE MADERA



Se trata de barandillas correderas fijadas en los paneles del cabecero y el piecero. Pueden instalarse en toda nuestra gama de camas (anchura 90/100/120/140/160 cm). También son compatibles con nuestras extensiones de somier gracias a extensiones específicas (véase al lado).

Estas barreras son compatibles con 2 paneles de nuestra gama:

- ▶ Carmen
- ▶ Val de vie

Cumplen los requisitos de separación de la norma EN 60601-2-52.

Disponibles en 3 acabados:

- ▶ Recubrimiento de polímero de color Chêne Lindberg.
- ▶ Pintura barnizada según los colores de nuancier
- ▶ Pintura laqueada según los colores de nuancier

### Compatibilidad

- Todas nuestras barandillas son incompatibles con los paneles largos universales.
- Las barandillas son obligatorias para el revestimiento de hoteles con paneles largos y anchos (opción disponible con paneles Carmen y Medidom).

# LAS BARANDILLAS DE PROTECCIÓN



## BARANDILLAS TELESCÓPICAS / ALUMINIUM/ MADERA



Estas barandillas correderas están formadas por 2 segmentos de idénticas dimensiones. Están equipadas con un sistema patentado de bloqueo/desbloqueo para garantizar la seguridad de los pacientes. La parte metálica es de aluminio, mientras que la parte superior (pasamanos) es de madera maciza.

Estas barandillas son compatibles con :


Todas nuestras camas \* Paneles: **Abélia / Stylyvia / Novida**

Cumplen los requisitos de separación de la norma EN 60601-2-52.



Desbloqueo seguro de la barandilla 1/2 mediante un mecanismo de doble acción: Hay que pulsar simultáneamente los 2 botones y subir la barrera antes de poder bajarla.

- ✓ 3 alturas = 3 usos
- ✓ posición alta = sujeción
- ✓ posición intermedia = percepción segura para el paciente
- ✓ posición baja = entrar y salir de la cama

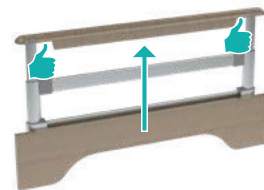

Están disponibles en 2 acabados para el pasamanos:

- ✓ Barniz según la carta de colores
- ✓ Lacado según carta de colores
- \* Excepto Kalin, DUO, Médicalys

	ALDRYS	X'PRESS (LOW)	X'PRIM	MEDICALYS	GAMME AERYS	XXL DIVISYS	XXL X'PRESS	DUO DIVISYS	KALIN	DIMENSIONES	ACABADO/ COMPOSICIÓN
Barandilla plegable A637-00/A638-00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	Longitud en posición desplegada : 1,47 m Altura en posición desplegada: 37,5 cm en comparación con el somier	Metal pintado
Barandilla madera A671-00 ( Chêne Lindberg) Otros acabados : A580-00 (varnizado) A581-00 (laqueado)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	Modelo específico	Longitud total de la cama Altura: 37,5 cm en relación con el somier Disponble con un cable de extensión (extensión para usar con extensión de somier 4 piezas): A685-00 (Chêne Lindberg) A687-00 (Laqueada)	Capa polymère chêne Lindberg o laqueada
Semi-barandilla Aluminio A688-00/A689-00	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	3 Alturas operativas	Aluminio Madera maciza lacada o varnizada

➤ Alternativas a la no sujeción: ¡piensa en la colchoneta!

## SECURFORM PROTECCIÓN, ESTABILIDAD, PRACTICIDAD

Limitar el uso de sistemas de retención garantizando al mismo tiempo la seguridad de los pacientes y residentes con riesgo de caídas.



Se recomienda la esterilla amortiguadora SÉCURFORM para proteger a las personas en caso de caída. La espuma especialmente diseñada proporciona una excelente protección para los pacientes. Proporciona una buena estabilidad al caminar y un acceso directo y fácil a los cuidadores. La colchoneta acolchada SÉCURFORM es extraíble, plegable y fácil de guardar.

**Características:**

- ▶ Espuma viscoelástica densidad 80 kg/m<sup>3</sup>