



ALDRYS CONFORT 100

La cama **ALDRYS** está diseñada para preservar la **autonomía residencial de las personas mayores con fragilidad cognitiva**.

Su somier de **láminas de 100 cm** de ancho aumenta la **comodidad del usuario** y facilita sus movimientos.

  ≤ 135kg



24 a 80 cm



Hasta 70°



PROCESO
PATENTADO
N°FR2966708

MONTAJE / DESMONTAJE
**ERGONOMÍA
DEL SOMIER**



Mécanica / Eléctrica
y Control



Paneles
y accesorios

Recomendaciones de HAS

Para limitar el riesgo de caídas y los riesgos de sujeción física de las personas mayores, la HAS sugiere la alternativa "cama baja recomendada (menos de 45 cm de altura)".

HAS. Evaluación de las prácticas profesionales en los establecimientos de salud. Octubre de 2000. p. 23.

VENTAJAS DEL PRODUCTO

Ancho 100 cm: una cama más ancha contribuye a un mejor sueño y de calidad¹

Según una encuesta del Instituto del Sueño y la Vigilancia, "una de cada tres personas sufre trastornos del sueño, principalmente insomnio²". El aumento de la estatura y del peso exige también una ropa de cama mejor adaptada a su morfología. La ropa de cama puede influir en el sueño a través de una sensación de incomodidad física o psicológica. Un estudio observacional realizado en 2012 para evaluar el sueño de las parejas demostró que la ropa de cama mejora la calidad del sueño y que el tamaño de la cama mejora la calidad del sueño profundo, que es el más reparador.³

¹ Fuente : Informe sobre el sueño. Ministerio de Sanidad y Solidaridad. Diciembre de 2006. p.7.

² Encuesta "Sueño y ritmo de vida" realizado por INSV/BVA Healthcare del 12 al 16 de enero de 2009.

³ Estudio observacional realizado en una muestra de 10 parejas en casa - hombres y mujeres de entre 20 y 60 años sin trastornos del sueño- acostados en camas de 140x190 cm (comparador) y luego en camas de 160x200 cm.

Deben proporcionarse barandillas de cama si así se especifica en la prescripción.




COMPATIBILIDAD

Compatible con la mayoría de grúas de pacientes y carros de cama.



CAJA DE CONTROL CA40

La tecnología SMPS (transformación electrónica de la tensión) reduce el ruido y las vibraciones.

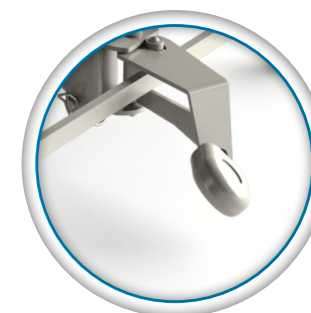

FRENO CENTRALIZADO **PATENTADO**

Garantiza un frenado seguro. Un solo pedal a los pies de la cama. Frena las 4 ruedas.

OPCIONES



COMPOSICIÓN		ALDRYS CONFORT
Somier		100 x 200 cm
Altura variable		24 cm a 80 cm
Elevador reposapiernas		Version C : inclinación de 26° máximo por cremallera Version P : flexión de rodillas 26° (muslos) et 16° ajuste de los pies mediante cremallera Version H : flexión eléctrica con apoyo horizontal de la pantorrilla
Capacidad de carga		Carga de trabajo segura : 170 kg Peso paciente máximo: 135 Kg / Accesorios 15 Kg / Colchones 20 Kg
Ruedas		Ø 100 mm
Motor		LINAK IP 66
Peso dispositivo	Version C	80,9kg
	Version P/H	85,5kg