



axtar
XXL®

INDICACIONES TERAPÉUTICAS

Ayuda para la prevención de UPP en pacientes de **ALTO RIESGO**. Pacientes encamados más de 15 horas al día.

Ayuda a tratar las úlceras por presión de **grado 1 a 4** en la zona de apoyo.

 100 ≤ 270kg



NORMATIVA DE FUEGO
EN 597 part 1 & 2 GPEM/CP
D1-90 Classe D



automatic
— technology —
PATENTADA

COMPATIBLE
PROGRAMME
Aircare®



À commander
sur le site (30)
Nîmes




Score escala de Braden



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ▶ 2 modos terapéuticos : Dinámico, Estático bajo presión
- ▶ Modo cuidado
- ▶ Sistema patentado para el cálculo automático y continuo de la presión de inflado en función de la morfología del paciente.
- ▶ Ajustes de confort independientemente del modo utilizado y de la posición del paciente en la cama.
- ▶ 2 anchos disponibles : 120 cm et 140 cm
- ▶ Alarmas: visuales y sonoras
- ▶ Código QR para acceder rápida y fácilmente a la información del producto
- ▶ Se entrega listo para su uso

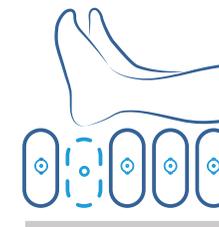

5 CELDAS DEL TALÓN INDEPENDIENTES
Y ACCESIBLES.

FUNDA	ANCHO DE CAMA (CM)	CARTÓN INDIVIDUAL
	120	VAXT/XXL-120
	140	VAXT/XXL-140

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Para pacientes de hasta 270 kg de peso, disponible en 2 anchuras: 120 cm o 140 cm
- Bordes estabilizadores de espuma firme para facilitar el levantamiento de la cama y asegurar una posición correcta al acostarse.
- Descarga de Talonera accesible desde el exterior.
- Funda azul PUHD



CELDA

- ▶ 21 celdas de poliuretano ether de 20 cm independientes y desmontables
- ▶ 4 zonas terapéuticas :
 - 2 celdas de la cabeza estáticas.
 - 4 celdas cervico-dorsales
 - 10 celdas alrededor de la zona del sacro con una base de aire para garantizar la estabilidad.
 - 5 células de talón con descargas de talón accesibles desde el exterior.




VÁLVULA CPR LATERAL (Cardio Pulmonary Rescue)

- ▶ Permite desinflar el colchón en menos de 15 segundos para un masaje cardíaco.



BORDES ESTABILIZADORES

- ▶ Para facilitar las transferencias

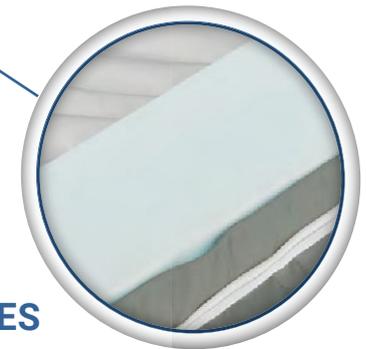



AIRCARE



AIRCARE



- **Plataforma segura** para el seguimiento de sus equipos y operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo. **Servicio gratuito.**
- Software común a todos los dispositivos **AXTAIR.**



Herramienta del fabricante



Trazabilidad optimizada y segura



Mantenimiento simplificado



Ahorro de tiempo



Diseño ecológico

COSTES DE MANTENIMIENTO CONTROLADOS

€ **70%** reducción de costes con Aircare

- Coste de revisión basado en una plantilla de 50 colchones.
- Vida útil 6 años. 2 revisiones.

Beneficios

- ✓ Reducción del **tiempo de intervención.**
- ✓ Reactividad y autonomía del **personal técnico.**
- ✓ Reducción de los **costes logísticos y ahorro de tiempo.**
- ✓ Total **autonomía para el mantenimiento.**

Trazabilidad integrada conforme a la normativa.



axtair **xxxl**



Usuarios con riesgo de UPP medio a elevado
Ayuda al tratamiento de UPP de estadio 1 a 4

axtair **one plus**



Eficiente en estadios iniciales

axtair **automorpho** **sensor** technology



Tratamiento completo

axtair **automorpho plus**



Tratamiento y comodidad con total simplicidad



AIRCARE

¿Cómo adquirir el servicio gratuito Air Care?



Compra Colchón Axtair

Con la compra de cualquier colchón de aire motorizado de la gama AXTAIR.



Nombre de usuario y contraseña

Winncare asigna al cliente su usuario y contraseña, enviado al correo electrónico del cliente.



AirCare Maintenance

Con estos datos el cliente puede tener acceso a la plataforma AirCare Maintenance. Le aparecerá los diferentes compresores que tenga con sus respectivos números de lote/serie.

WIN CARE