



COJINES DE
ELEVACIÓN

COJÍN DE ELEVACIÓN **ELK**

El **cojín de elevación ELK** es un cojín compacto que funciona con pilas. Si alguien se cae y puede arrastrar los pies sobre el cojín o rodar sobre él desde la posición de recuperación y recibir ayuda para sentarse erguido, entonces el Elk se puede inflar pulsando un botón con alguien que sostenga a la persona por detrás para llevarla a una posición sentada y preparada para levantarse.


Fácil de configurar: conecte las cuatro mangueras del mando a distancia a los números y conectores de color.

Peso Máximo usuario: 450 Kg

Altura máx asiento: 56 cm.
 Profundidad del asiento: 50 cm.
 Ancho: 57 cm.
 Peso total producto: 3.6 Kg.
 Compresor Airflo: 24.
 Rendimiento de elevación por carga: hasta 9 elevaciones.

CARACTERÍSTICAS

1. Levanta a la persona **más frágil hasta 450 kg del suelo.**
2. Ideal para su uso en apartamentos con apoyo y atención domiciliaria.
3. El cojín de elevación se infla con un compresor Airflo 24 y con control manual.
4. El material está diseñado con unos estándares excepcionalmente altos, con una extraordinaria durabilidad.
5. Reduce el riesgo de **lesiones musculoesqueléticas para el cuidador**
6. Puede utilizarse en espacios reducidos donde no caben los equipos de elevación tradicionales.
7. **Puede usarse para levantar una camilla..**
8. Proporciona una elevación segura y digna para una persona caída.

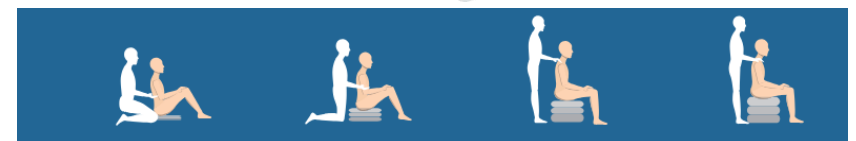

Fotos no contractuales

