

# Mobile Flex

## Sistemas de 2 poste

Sistema de 2 postes ajustable en altura y anchura.

### Aplicación principal

Domicilio  
Institución  
Hospital

Adecuada para personas que necesitan una solución de elevación inmediata y/o temporal que pueda montarse, utilizarse y desmontarse de forma fácil y sencilla.

**El Mobile Flex** es fácil de montar. **No se necesitan herramientas** para ajustar la altura y la anchura y proporcionar soluciones temporales fiables.

El ajuste de la altura mediante resorte de gas se realiza en tan solo unos segundos, lo que proporciona un uso inmediato para el cuidador y el cliente. Los rieles telescópicos proporcionan una altura de elevación suficiente para ofrecer soluciones adecuadas para la mayoría de las salas de cuidados y la mayoría de las situaciones de transferencia.

La grúa móvil Flex, combinada con la innovadora **grúa de techo Luna de Winncare**, es un sistema de elevación sencillo y funcional, y la opción ideal tanto para la asistencia domiciliaria como para uso institucional.

**Mobile Flex** proporciona una capacidad de elevación de hasta 275 kg, utilizando así todo el alcance de la grúa de techo Luna.

### Funciones principales

Capacidad de carga de 275 kg  
Dos modelos: Mobile Flex 3000 & 4000  
Anchura telescópica ajustable  
Ajuste de altura instantáneo asistido por resorte de gas.  
Montada sobre una base con ruedas  
Montaje y ajustes sencillos  
Utiliza todas las funciones de la grúa de techo Luna  
Sólo 1150 mm de profundidad  
Carrito de bayoneta de serie

### Accesorios

Fijación de bayoneta a fleje





Fácil ajuste de la anchura sin herramientas



Dos juegos de ruedas con freno. Basta con pisar el pedal para activar el freno.



Grúa de techo Luna montada en el Mobile Flex



Ajuste instantáneo de la altura (mecanismo de resorte de gas). Encima de la empuñadura hay una sencilla guía de usuario.



## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Diseño práctico y funcionalidad sencilla
- Se puede ajustar en toda su anchura para maximizar la cobertura de la habitación.
- Fácil de ensamblar
- Ajuste rápido de altura y anchura
- Fácil de limpiar

Version	Item-number
Mobile Flex / 3000	016-01147
Mobile Flex / 4000	016-01148
Accesorios	
Bayoneta para fijar	-

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Mobile Flex / 3000	Mobile Flex / 4000
Carga Máx	275 kg	275 kg
a	1775 mm	1775 mm
b	2160 mm	3160 mm
c	3160 mm	4160 mm
d	120 mm	120 mm
e	1150 mm	1150 mm
f	1890 mm	1890 mm
g	2540 mm	2540 mm
h	1770-2420 mm	1770-2420 mm

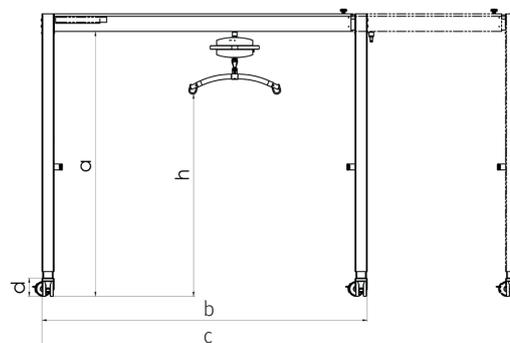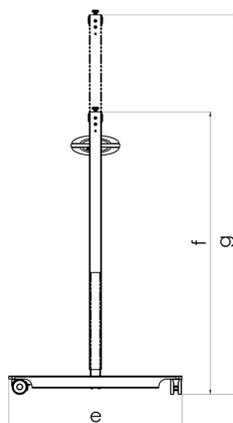

Consult the Technical manual for further specifications. All figures and measurements are for guidance only and may differ in actual situations. Ergolet reserves the right to changes without notice.

Product photos may include accessories. Consult your dealer.



WinnCare Nordic ApS  
Taarnborgvej 12C  
4220 Korsoer  
Denmark

e-mail: [info@winnCare.es](mailto:info@winnCare.es)

[www.wearewinnCare.com](http://www.wearewinnCare.com)

