



À commander sur le site (35) Miniac-Morvan

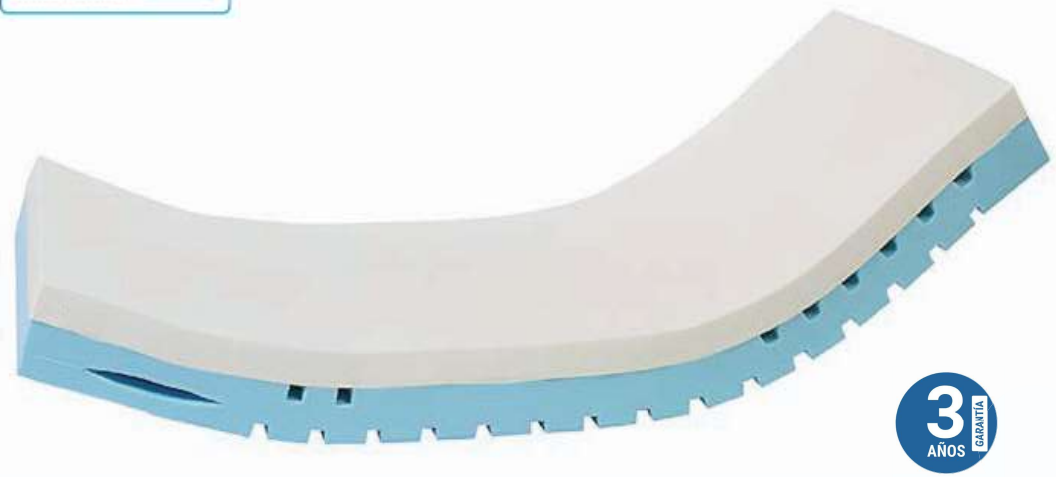

3 ANOS GARANTIA

Score Escala de Braden

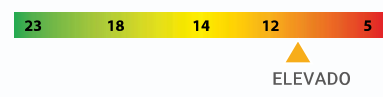

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Capa superior de **espuma viscoelástica  $\geq 75 \text{ kg/m}^3$** .
- Base de espuma **HR  $\geq 34 \text{ kg/m}^3$** .
- **Espesor de las 2 capas: 17,5 cm.**
- Disponible en 1 ancho: 90 cm.
- Dimensiones del colchón: 198 x 88 x 17,5 cm.
- Dimensiones de la cama: 200 x 90 cm.
- Peso del colchón: ~ 17,5 kg.
- Funda : **PHARMATEX 3 caras**



## VITA FORM 4

### INDICACIONES TERAPÉUTICAS

El colchón VITA FORM 4 ayuda a la prevención de UPP en pacientes de **RIESGO MEDIO A ELEVADO**, en la aparición de UPP (según criterio clínico y escalas), levantados durante el día y encamados más de 15 horas.

Ayuda al tratamiento de IUPP de grado **1 a 2** en zona de apoyo con sistema de descarga localizada o de posicionamiento.

**40 ≤ 150kg**




NORMATIVA DE FUEGO EN 597 part 1 & 2

### VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Un producto único, hecho a medida para prevenir las UPP.
- Recortes internos para airear la espuma viscoelástica y limitar el riesgo de maceración.
- Recortes exteriores para adaptarse a la forma natural de la cama.
- El colchón más grueso del mercado, con una base de espuma de alta densidad para garantizar el confort y la durabilidad.

FUNDA	CAJA INDIVIDUAL	ROLLO COMPRIMIDO (RC) Cada 6 unidades
	17.17413J	17.17413J.X6

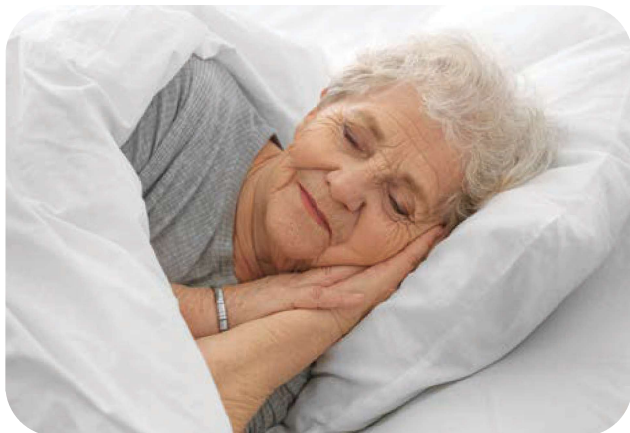

## PREVENCIÓN DE UPP

El contacto del cuerpo, gracias a la espuma viscoelástica (memoria con forma) permite repartir el peso del cuerpo (intensidad de la fuerza) sobre una superficie más importante lo que reduce los puntos de presión ejercidos sobre las zonas de riesgo de lesiones cutáneas, independientemente de la morfología del paciente.



## GESTIÓN DE TALONES

Gracias a un corte interno único, el colchón VITA FORM 4 asegura una mejor adaptación de los miembros inferiores en la espuma viscoelástica (memoria con forma), y una reducción de presiones a nivel de los talones.



## ROBUSTEZ

Combinado con un corte único que permite la mejor adaptación a nuestras camas (90), el diseño innovador de VITA FORM 4 con una altura de 17,5 cm y una base de espuma de alta resiliencia (HR) asegura una vida útil del colchón mas duradero.

## CONFORT

La inmersión del cuerpo, gracias a una espuma viscoelástica, permite distribuir el peso del cuerpo (intensidad de la fuerza) sobre una mayor superficie, lo que reduce los puntos de presión ejercidos sobre la(s) zona(s) de riesgo de úlceras por presión. s), cualquiera que sea la morfología del paciente.

El colchón VITA FORM 4 aporta confort gracias a sus cortes únicos:

- ✓ 2 cortes en la zona de la cabeza y en la zona del pie, que permite ablandar la espuma y facilitar la circulación del aire, limitando los efectos de sudoración/maceración.
- ✓ 3 zonas de diferentes durezas (cabeza, sacro y talones).
- ✓ Un corte externo que permite la mejor adaptación a la cama y mayor confort.

