

# GRÚA HOP E-150

≤ 150 kg



CONFORME A LOS REQUISITOS DEL REGLAMENTO EUROPEO 2017/745 APLICABLE A LAS GRÚAS PARA LA TRANSFERENCIA DE PERSONAS

## Ventajas del producto

### PRÁCTICA

**Ergonómica:** recoge a una persona del suelo, rango de elevación hasta 1,57 m.

**Apertura de patas manual** con la ayuda de un sistema de pedal.

Fácil de desmontar **en 2 partes.**

**Maniobrable con ruedas dobles.**

### SEGURA

Caja de control **con parada de emergencia.**

Su brazo permite **recoger a una persona del suelo.**


**Percha de 4 puntos** para mayor seguridad y comodidad.

**Alarma sonora:** aviso de batería baja

Arnés Fletty con apoyo cabeza



Botón de parada de emergencia

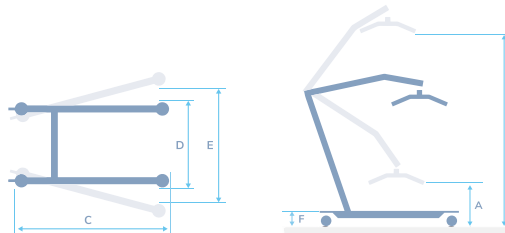

A	B	C	D	E	F	RUEDAS DELANTERAS	RUEDAS TRASERAS	AUTONOMÍA	MOTOR	PESO
39cm	157cm	95cm	55cm	76cm	11cm	7,5cm	7,5cm	40/60 ciclos con una carga de 80 kg	LINAK IP 54	28,8 kg



(\*) Para la grúa: realizando mantenimientos anuales oficiales





## ARNÉS DE BAÑO

PVC para el baño



## FLETTY CON REPOSACABEZA

El fletty para las transferencias más habituales,



## MALLA CONFORT 3D

Responder a las necesidades de las personas con patologías específicas.



## VENTAJAS DEL PRODUCTO

### CONFORT

Las zonas bajo los muslos del paciente están acolchadas para ayudar a que la correa se ajuste mejor. Esto garantiza una mejor sujeción.

### ERGONOMIE

- El borde amarillo que simboliza la columna vertebral facilita la colocación de la correa, sobre todo cuando se está tumbado.
- Las asas de colores ayudan a guiar al paciente durante las operaciones de traslado.


### TRAZABILIDAD

Identificación por número de lote y año de fabricación.

## RECOMENDACIONES DE USO

TIPO DE TRANSFERENCIA	ARNÉS	ARNÉS BAÑO	ARNÉS BAÑO APOYO CABEZA	ARNÉS FLETTY	ARNÉS FLETTY APOYO CABEZA	ARNÉS CONFORT 3D	ARNÉS CONFORT 3D APOYO CABEZA
Silla ↔ Silla		•	•	•	•	•	•
Silla ↔ Cama		•	•*	•	•*	•	•*
Ducha y Baño		•	•	-	-	-	-
Ir y volver del aseo		•	•	-	-	-	-
Desde el suelo			•		•		•
ESTADO FUNCIONAL DEL PACIENTE	ARNÉS	ARNÉS BAÑO	ARNÉS BAÑO APOYO CABEZA	ARNÉS FLETTY	ARNÉS FLETTY APOYO CABEZA	ARNÉS CONFORT 3D	ARNÉS CONFORT 3D APOYO CABEZA
INESTABILIDAD EN CABEZA			•		•		•
Contraer el cuerpo		-	-	-	-	•	•
Amputación extremidades inferiores		PARA AMPUTACIONES DE RODILLA: PASAR CADA CORREA POR DEBAJO DE LOS 2 MUSLOS.					
TALLA M		102 104 004	102 104 016	102 107 012	102 107 016	102 105 012	102 105 016
TALLA L		102 104 013	102 104 017	102 107 013	102 107 017	102 105 013	102 105 017
MATERIAL		PVC POLIÉSTER		POLIPROPILENO		POLIÉSTER 3D	
CALIDAD		TELA IMPERMEABLE		TELA NO ADHERENTE		TEJIDO TRANSPIRABLE	
LAVADO Y MANTENIMIENTO							
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES		-		ACOLCHADOS BAJO LOS MUSLOS		ACOLCHADOS BAJO LOS MUSLOS	
PARA LAS CORREAS DE LA CABEZA: REFUERZO DE LA PARTE SOBRE LA QUE DESCANSA LA CABEZA							

\*Recomendados

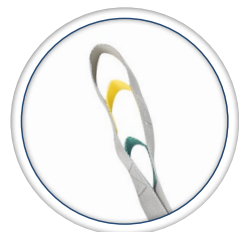

**3 AJUSTES**  
para pacientes de entre  
1,50 m y 1,90 m de altura

